



Dossier informativo

¿QUÉ ES STOPVID?

Stopvid nace como marca nacional a través de una empresa dedicada al sector textil con más de 30 años de experiencia. Actualmente centra su actividad en complementos de prevención y cuidado para la salud y la higiene.

¿QUÉ SON LAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES?

Nuestras mascarillas están fabricadas, producidas, diseñadas, envasadas y con criterios de uso acorde a la normativa UNE 0065/2020. Nuestras mascarillas se encuentran en continuo periodo de revisión con número identificativo 2020TM1633 en los centros homologados del gobierno de España que evalúan este producto.

Según UNE 0065/2020: “Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 y a la gran demanda de sistemas y productos barrera, se ha considerado necesario elaborar un documento con los requisitos mínimos que deberían tener las mascarillas higiénicas a ser utilizadas en este escenario, con el fin de que éstas complementen los gestos de barrera y las reglas sociales relacionadas con el distanciamiento entre personas.

Las mascarillas higiénicas objeto de esta especificación no deben considerarse un producto sanitario (PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el sentido del Reglamento UE/2016/425.

El gobierno ha clasificado el uso de las mascarillas higiénicas reutilizables como preferencia en personas sanas.

Adjuntamos dirección de enlace:

<https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documentos/2020/030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf>

¿Qué recomendaciones existe según el gobierno para niños y niñas?

En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad.

Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años. Recuerda, además, que es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas.

Niños y niñas positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

En caso de utilizar mascarillas, niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad.

Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años. Recuerda, además, que es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas.

Niños y niñas positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

Nuestra marca, realiza las mascarillas higiénicas reutilizable bajo las especificaciones que realiza la UNE 0065/2020. Que especifica lo siguiente:

- Especificación UNE 0065:2020, Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

¿CÓMO DEBEN SER LAS MASCARILLAS?



Las mascarillas higiénicas objeto de esta especificación deben:

- - cubrir nariz, boca y barbilla;
- - estar confeccionadas con un material reutilizable filtrante adecuado;
- - estar confeccionadas con material reutilizable que permita la respiración;
- - utilizar materiales reutilizables que en contacto con la piel del usuario no presenten riesgos conocidos de irritación o efectos adversos para la salud;
- - garantizar un ajuste adecuado con la cara.

Las mascarillas higiénicas reutilizables fabricadas con los materiales especificados y conforme al diseño y los métodos de confección indicados en esta especificación, dan presunción de conformidad con la misma (Especificación UNE 0065:2020).

Nuestras mascarillas tienen la siguiente estructura:

- Capa 1: ALGODÓN 100%. El diseño de la mascarilla que el consumidor final podrá elegir entre nuestra amplia gama de productos.
- Capa 2: TNT alto gramaje. Capa que sirve de filtro acorde a los parámetros establecidos en nuestra amplia gama de productos.
- Capa 3: algodón 50-50 pol. Aporta sensación de comodidad y previene la irritabilidad de la piel.

ENSAYOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

En base al marco regulador, nuestras mascarillas se encuentran sometidas a través del INSTITUTO NACIONAL TEXTIL.:

La norma de evaluación de las mascarillas higiénicas reutilizables, deben de superar los siguientes criterios de aceptación.

Tabla 1 – Criterios de aceptación para las mascarillas higiénicas reutilizables (usando los ensayos de la Norma UNE-EN 14683)

Ensayos	Criterio de aceptación
Eficacia de filtración. (%) (“ensayo BFE”) Ensayada a través de ensayo de eficacia de filtración bacteriana (BFE), (%) (apartado 5.2.2 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)	+ 0 = 90
Respirabilidad (Presión diferencial), (Pa/cm ²) (apartado 5.2.3 de la Norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019)	-60

TALLAJE:

Las mascarillas higiénicas reutilizables se han desarrollado para cuatro tallas, una para adultos y niños mayores de 12 años y tres tallas diferentes para niños, de 3 a 12 años, en función de los datos antropométricos de la población española [5].

En la siguiente tabla se proporcionan las cuatro tallas de mascarillas higiénicas en relación con los rangos de edad establecidos:

Tallas	Edad (años)
Niño pequeña	3 a5
Niño mediana	6 a9
Niño grande	10 a 12
Adulto	Mayor de 12

TIPO DE AGARRE.

Facilitamos al cliente tres tipos de agarre:

- Modelo agarre orejas.
- Modelo agarre cabeza.
- Modelo agarre lazo.

EMBALAJE, MARCADO Y CONDICIONES DE USO.

Las mascarillas se embalan de tal manera que estén protegidas frente a cualquier daño mecánico y frente a la contaminación, antes de su primer uso. El embalaje individual o agrupado queda a la elección del fabricante.

Las mascarillas deben estar marcadas de manera clara y duradera en el embalaje más pequeño disponible comercialmente, o bien, dicho marcado debe ser visible y legible a través del embalaje si éste es transparente. Stopvid cumple con guía de uso en cada una de nuestras mascarillas.


GUÍA DE USO



ADVERTENCIAS:

- Las mascarillas son de uso individual como recoge la normativa UNE 0065/2020.
- La colocación debe ser supervisada por un adulto en el caso de los niños.

Adultos

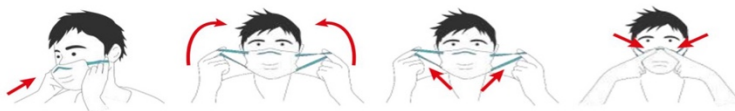

Niños

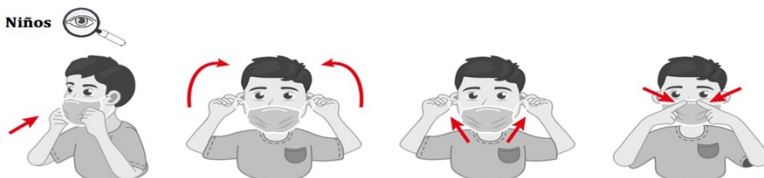


Figura 2 - Instrucciones de colocación de la mascarilla higiénica

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA:

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda, evitando la presencia de cabello.

PASO 1: LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.

PASO 2: IDENTIFICAR LA PARTE SUPERIOR DE LA MASCARILLA.

PASO 3: POSICIONARSE LA MASCARILLA EN LA CARA, A LA ALTURA DE LA NARIZ.

PASO 4: SOSTENER LA MASCARILLA DESDE EL EXTERIOR Y SUJETAR LAS GOMAS DESDE AMBOS LADOS.

PASO 5: BAJAR LA PARTE INFERIOR DE LA MASCARILLA A LA BARBILLA.

PASO 6: VERIFICAR QUE LA MASCARILLA CUBRE LA BARBILLA.

RETIRADA DE MASCARILLA:

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

PASO 1: QUITARSE LOS GUANTES DE PROTECCIÓN.

PASO 2: LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.

PASO 3: RETIRAR LA MASCARILLA SIN TOCAR LA PARTE FRONTAL DE LA MASCARILLA.

PASO 4: LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O FROTARLAS CON UNA SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA.

LAVADO Y SECADO DE MASCARILLAS: (número de lavados ver en etiqueta principal).

Se debe realizar un ciclo completo de lavado (humedecer, lavar, enjuagar), con detergente habitual, a una temperatura de lavado de 60º.

Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia (a lavar) y ropa limpia. La persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar mascarillas sucias.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2h posteriores al lavado.

Evitar depositar la mascarilla en sitios con posibilidad infecciosa.

Después de cada ciclo de lavado realizar inspección ocular.

PROCEDIMIENTO PARA DESECHAR LA MASCARILLA.

Las mascarillas deben desecharse introducidas en una bolsa de plástico, se recomienda doble bolsa por posibles roturas de la primera bolsa donde se ubica la mascarilla.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO

Se recomienda no usar la mascarilla por cuestiones de comodidad e higiene por un tiempo superior a 4h. En caso de que haya por el uso un deterioro o humedad se recomienda sustituirla por otra.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

PROCESAMIENTO DE PEDIDOS:

Realiza su pedido a través de página web www.stopvid.es acceda al apartado tienda y proceda a elegir primero categoría niño/niña, posteriormente elija el diseño que más le guste y el tipo de agarre.

Gracias por su confianza.